

GLOBAQUAT® RTU med

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО *готовый раствор*

Используются для очистки и дезинфекции медицинского оборудования (ЭКГ, ультразвуковые датчики, кувезы, стоматологических кресел для пациентов, медицинских приборов из акрила и пластика разного вида в т.ч. их проводов, гигиенических и противопролежневых матрасов и т.д.).

Также соответствует требованиям пищевой промышленности, косметологии и т.д.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- безалкогольное и безальдегидное
- без запаха и красителя
- быстродействующее (1 мин.)
- подходит для широкого спектра материалов
- очень хорошие чистящие свойства
- в удобной бутылке с распылителем
- не обладает туберкулоцидным действием!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Распылить или нанести тряпкой на поверхность и оставить для воздействия в течение 1 минуты. Поверхность должна быть покрыта полностью.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

60 секунд

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

Продукт обладает бактерицидным, *C.albicans*, вирулицидным действием - оболочечные вирусы (вкл. гепатит В, гепатит С, ВИЧ, коронавирусы, вирусы гриппа и вирус коровьей оспы) и безоболочечные вирусы (вкл. адено- и ротавирус).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 16615

ДРУГИЕ ТЕСТОВЫЕ МЕТОДЫ

EN 1040, EN 1275, EN 1276, DVG, DVV/RKI, DGHM, «Воздействие на акриловое стекло» Röhm GmbH

ХРАНЕНИЕ

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия, хранить при комнатной температуре, не хранить на открытом солнце и избегайте его замерзания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Восстановленный раствор экологически безопасен, все активные ингредиенты биологически разлагаются в сточных водах. Чтобы избавиться от упаковки, промойте ее содержимое водой.

СОСТАВ


четвертичные аммониевые соединения

pH 7




Продукт имеет маркировку CE в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам.

УПАКОВКА

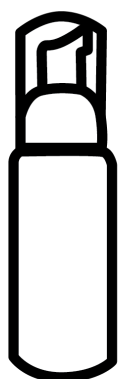

250мл бутылка

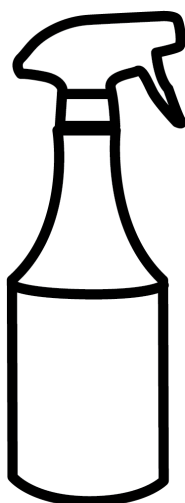

1л бутылка с распылителем



5л канистра



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 3, Jälgimäe 76404
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

