

CYCLONE RTU med

PUHASTUSOMADUSTEGA DESINFITSEERIMISVAHEND

valmislahus

Cyclone RTU med on efektiivne vahend meditsiiniseadmete (siibrid, pott-toolid jne) puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja ebameeldiva lõhna eemaldamiseks. Toode sobib veepesu taluvate pindade puhastamiseks.

Vastab tervishoius, toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele.

TOOTE OMADUSED

- heade puhastusomadustega
- eemaldab uriinist tuleneva ebameeldiva lõhna
- kiire toimeaeg (1 minut)

KASUTAMINE

Kanda pinnale pihustades või lapiga, lasta toimida 1 minut ning loputada puhta veega.

TOIMEAEG

60 sekundit

MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER

MIKROORGANISM	TINGIMUS	KONTSENTRATSIOON	TOIMEAEG
Bakteritsiidne	mustad tingimused	lahjendamata	60 sekundit
Pärmseentevastane toime			
<i>Candida albicans</i>	mustad tingimused	lahjendamata	60 sekundit

VASTAVUS STANDARDITELE

EN 13727, EN 1275, EN 13624

SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada toatemperatuuril, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes ja vältida külmumist.

UTILISEERIMINE

Toode on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Spray oma metallosadega sobib pakendijätmetega kokku kogumiseks. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

OHUTUSALANE TEAVE

Täiendava ohutusteabe leiate toote ohutuskaardilt.

KOOSTIS

100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid 0,12g, (C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid 0,12g.

pH 3

Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC  0537


PAKENDID



1L spray pudel



1L klappkorgiga pudel

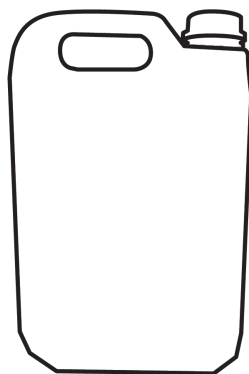

5L kanister



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

